



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, the Netherlands
Amway (UK) Limited, c/o Registered Office -
PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain
Square CS Birmingham, B3 3AX.
Amway of Australia, Level 12, 67 Albert
Avenue, Chatswood, NSW 2067 Amway of
New Zealand (Auckland)
Імпортёр (прийняття претензій): ТОВ "Емвей
Україна", вул. Казимира Малевича, 87, Київ
03150, Україна, тел.: (044) 495-13-00.
www.amwayglobal.com



Li-ion



Посібник користувача



Масажний міні-пістолет

- Дякуємо за придбання нашого масажного міні-пістолета.
- Перед використанням цього приладу уважно прочитайте цей посібник та зберігайте його для подальшого використання.
- У разі будь-яких розбіжностей між інформацією, наведеною в цьому посібнику та приладом, пріоритет має сам прилад.

Застереження	01
Позначення, символи та скорочення	01
Заходи безпеки	01
Огляд	05
Опис приладу	05
Призначення	05
Основні технічні характеристики	06
Конструкція приладу	07
Загальна конструкція приладу	07/08
Інструкція з використання	09
Підготовка перед використанням	09
Порядок використання	09
Гарантія	11
Технічне обслуговування	11
Утилізація відпрацьованих акумуляторів	12
Умови транспортування та зберігання	13
Гарантійні умови	14

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник та зверніть особливу увагу на попередження.

Позначення, символи та скорочення			
	Постійний струм (DC)		Придатний для переробки літій-іонний акумулятор
	Символ роздільного збору відходів електричного та електронного обладнання (WEEE)		Не кити прилад
	Увага! Ознайомтеся з супровідною документацією.		Уважно прочитайте цей посібник
	Крихке		Цією стороною догори
	Берегти від намокання		Папір придатний для переробки
	Максимальна кількість ярусів штабелювання		

Заходи безпеки

Перед використанням приладу уважно ознайомтеся з наведеними нижче заходами безпеки. Недотримання цих вимог може призвести до травм або виникнення небезпечних ситуацій.

Користувачі та ділянки застосування

- Прилад призначений для дорослих користувачів, за винятком людей похилого віку.
- Використовуйте прилад лише на м'яких тканинах тіла за відсутності больових відчуттів.
- Не використовуйте прилад для масажу голови, кісток або інших твердих ділянок тіла.
- Надмірний тиск може спричинити утворення синців. Якщо під час масажу ви відчуваєте біль або дискомфорт, негайно припиніть використання приладу.
- Використовуйте прилад лише на чистій та сухій шкірі.
- Тримайте пальці, волосся та інші частини тіла подалі від рухомих частин і задньої частини приладу.
- Не масажуйте ділянки з незначною кількістю м'язової тканини або розташовані близько до кісток, такі як великогомілкова кістка, тильна сторона стопи, ліктьовий суглоб тощо.
- Не використовуйте прилад на чутливих ділянках тіла, зокрема в зоні очей, зубів, грудних імплантатів, репродуктивних органів, протезів тощо.
- Не застосовуйте прилад на ділянках із ризиком переломів.
- Якщо біль або дискомфорт не минає, негайно припиніть використання та зверніться до лікаря.
- Цей прилад не є медичним виробом і не призначений для використання з лікувальною метою або в медичних закладах.
- Перед використанням перевірте, чи не пошкоджені прилад і кабель живлення. У разі виявлення несправностей не використовуйте прилад та зверніться до виробника або авторизованого сервісного центру для ремонту.

Щодо використання приладу

- Будь ласка, вибирайте найбільш підходящу масажну насадку під час використання приладу.
- Не вставляйте жодних предметів у вентиляційний отвір.
- Не занурюйте прилад у воду та не допускайте потрапляння води у вентиляційний отвір.
- Не допускайте падіння приладу та не використовуйте його неналежним чином.
- Будь ласка, перевіряйте прилад, акумулятор і зарядний пристрій перед використанням.
- Не модифікуйте прилад та не використовуйте його не за призначенням.
- Не залишайте прилад без нагляду під час роботи або заряджання.
- Не вмикайте прилад під час заряджання.
- Не кидайте прилад у вогонь.
- Не використовуйте прилад безперервно протягом однієї години; будь ласка, вимкніть його на 30 хвилин перед наступним використанням.

Щодо акумулятора

- Не занурюйте акумулятор у воду та не допускайте його намокання.
- Не заряджайте акумулятор за високої температури, а також не використовуйте і не зберігайте його поблизу вогню або нагрівальних приладів. У разі витoku електроліту або появи неприємного запаху негайно перемістіть прилад подаль від відкритого вогню.
- Не кидайте акумулятор у вогонь і не нагрівайте його.
- Заборонено транспортувати або зберігати акумулятор разом із прикрасами, шпильками для волосся чи іншими металевими предметами.
- Заборонено з'єднувати позитивний і негативний полюси акумулятора дротами або іншими металевими предметами, щоб уникнути короткого замикання.
- Не використовуйте цвяхи або інші гострі предмети, щоб проколоти акумулятор.

- Не бийте по акумулятору та не наступайте на нього.
- Не розбивайте та не кидайте акумулятор.
- Заборонено розбирати акумулятор у будь-який спосіб.
- Заборонено поміщати акумулятор у мікрохвильову піч або скороварку.
- Якщо з'явилися неприємний запах, нагрівання, деформація, знебарвлення або інші ознаки несправності, будь ласка, негайно припиніть використання; якщо акумулятор використовується або заряджається, негайно вийміть його з приладу або від'єднайте зарядний кабель.

Щодо заряджання

- Перед першим використанням зарядіть прилад до 100% (приблизно 3 години).
- Підключіть вихідний кінець USB-кабелю до порту заряджання постійного струму (DC), а вхідний кінець – до повербанка або зарядного пристрою (5 V (B) = 2 A; час заряджання може збільшуватися, якщо сила струму зарядного пристрою менша ніж 2 A).
- Зелений індикатор означає, що пристрій заряджається, і він автоматично вимкнеться, коли рівень заряду досягне 100%.
- Акумулятор можна заряджати при будь-якому рівні залишку заряду. Переконайтеся, що прилад вимкнено.
- Заряджання під час роботи приладу заборонено.
- Не допускайте повного розряджання акумулятора перед заряджанням.
- Під час використання приладу червоний індикатор вказує на те, що залишок заряду становить менше 30%.
- Коли червоний індикатор блимає, це слугує нагадуванням про те, що залишок заряду менше 20%, і необхідно негайно зарядити прилад.
- Загалом, середній час роботи становить близько однієї години, що визначається частотою вібрації та силою натискання під час масажу.

Опис приладу


Цей масажний міні-пістолет – це прилад для масажу м'язів. Його можна використовувати для масажу м'язів після фізичних навантажень, зокрема у разі відчуття скутості або втоми.

Призначення

Масаж м'язів після фізичних навантажень


Основні технічні характеристики

- Назва продукту: Масаажний міні-пістолет
- Модель приладу: QL/MINI.Q1-A
- Конструкція: В основному складається з модуля керування, масажних насадок і літій-іонного акумулятора;
- Частота вертикальної вібрації: ≤ 60 Hz; (Гц)
- Амплітуда: 7 mm (мм)
- Номінальна потужність: 25 W (Вт)
- Номінальна напруга: 11.1 V (В) $\approx$
- Ємність акумулятора: 800 mAh (мА·год)
- Таймер автоматичного вимкнення: 10 хвилин
- Прилад оснащений перемикачем режимів роботи;
- Масаажну насадку можна замінити за потреби;
- Режим роботи: переривчасте навантаження.
- Тип акумулятора: літій-іонний
- Номер моделі акумулятора: BEOKA-30
- Маса акумулятора: 67 g (г)
- Виробник акумулятора та адреса:
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc
Lithium-ion Battery Pack Assembly
Longtan Industrial Park 2nd Sec, east 3rd ring road, Chenghua district, Chengdu, Sichuan, China (Китай)

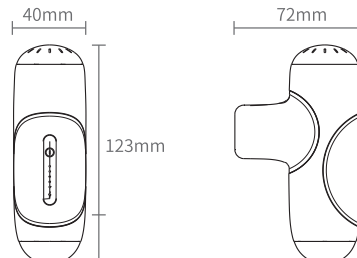

Конструкція приладу

знімні та замінні масажні насадки

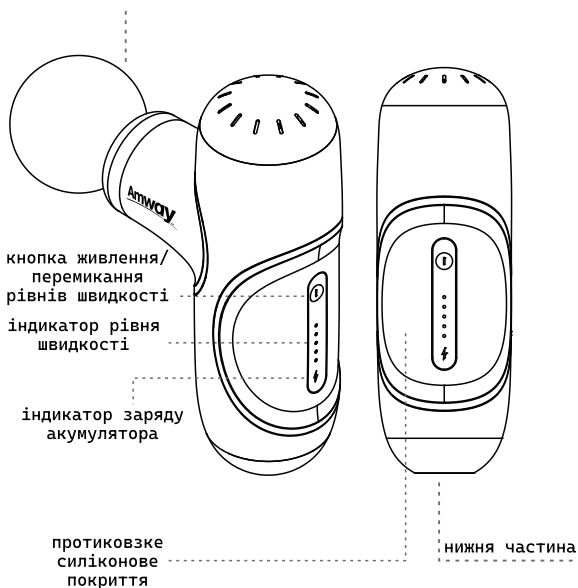

Конструкція приладу



U-подібна
насадка



стандартна
сферична насадка



мала кругла
насадка




амортизаційна
насадка



мала плоска
насадка

порт заряджання
Type-C

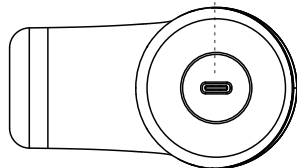


Підготовка перед використанням

- Розпакуйте коробку, потім перевірте наявність повної комплектації приладу та його аксесуарів. Якщо чогось не вистачає, будь ласка, зв'яжіться з вашим постачальником.
- Переконайтеся, що пристрій має достатній рівень заряду акумулятора

Порядок використання

Встановіть масажну насадку на прилад

- Коли прилад вимкнено, щільно притисніть масажну насадку до приладу. (Порада: U-подібну насадку необхідно встановлювати так, щоб фіксатор увійшов у паз. Інакше насадка може від'єднатися.)

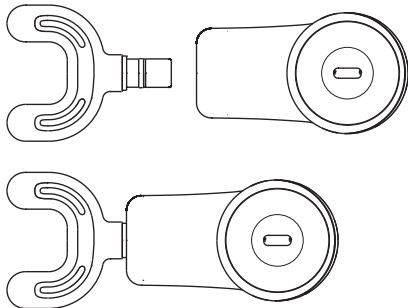

- Коли прилад вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку ① на панелі протягом 2 секунд, після чого прилад автоматично перейде на рівень швидкості 1; короткочасно натискаючи цю кнопку, ви можете перемикаати рівні швидкості від 1 до 5; натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд під час роботи приладу, щоб вимкнути його.
- Прилад автоматично зупиниться, коли час роботи досягне 10 хвилин.
- Світлодіодний індикатор показує відповідний рівень інтенсивності.
- Коли прилад перебуває в режимі очікування, він автоматично вимкнеться через 20 секунд.

Під час масажу відповідних ділянок тіла застосовуйте необхідну силу натискання та встановлену частоту вібрації.

Технічне обслуговування

- Очищуйте прилад злегка вологим рушником, а потім витирайте його сухою серветкою.
- Будь ласка, помістіть прилад у коробку, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- Не розбирайте прилад
- Для досягнення оптимальної роботи нового акумулятора рекомендується зарядити його до 100 % та повністю розрядити (до 0 %) три або більше разів.
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте його раз на місяць.
- Заборонено розбирати прилад без дозволу. Пошкодження, спричинені користувачем, не покриваються гарантією.

Утилізація відпрацьованих акумуляторів

Будь ласка, підтримуйте вторинну переробку акумуляторів (літій-іонних акумуляторів).

 Небезпека	Акумулятор, що використовується в цьому приладі, є спеціальним перезаряджуваним акумулятором і не повинен використовуватися в інших приладах. Будь ласка, не викидайте акумулятор для заряджання. • Не кидайте акумулятор у вогонь і не піддавайте його перегріванню; • Не проколуйте акумулятор цвяхами, не піддавайте його сильним ударам, не розбирайте та не модифікуйте; • Не допускайте прямого контакту позитивного та негативного електродів акумулятора з металевими предметами; • Будь ласка, не зберігайте акумулятор разом із прикрасами, шпильками та іншими металевими предметами. • Будь ласка, не заряджайте, не використовуйте та не залишайте в місцях із високою температурою, наприклад, поблизу вогню або під палочним сонцем. Наведені вище умови можуть призвести до нагрівання, займання, розриву та інших небезпечних явищ.
 Небезпека	Будь ласка, зберігайте витягнутий акумулятор у недоступному для дітей місці. • У разі випадкового проковтування негайно зверніться до лікаря. • У разі витоку електроліту з акумулятора не торкайтеся рідини голими руками та поведіться з нею наступним чином: • При потрапленні рідини з акумулятора в очі виникає ризик сліпоті. Не трійте очі руками. Негайно промийте їх чистою водою та зверніться за медичною допомогою. • Потраплення рідини з акумулятора на тіло або одяг може спричинити подразнення або пошкодження шкіри. Будь ласка, промийте це місце чистою водою. Якщо дискомфорт не зникає, негайно зверніться за медичною допомогою. • Розбирати прилад дозволяється лише під час його утилізації. Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травм та інших нещасних випадків. Якщо прилад потребує ремонту (за винятком заміни акумулятора), будь ласка, зверніться до продавця, у якого було придбано прилад.

- Внутрішній літій-іонний акумулятор у пристрої є цінним ресурсом, який можна переробити.
- Будь ласка, викиньте його та здайте до спеціалізованої організації, яка займається утилізацією відпрацьованих акумуляторів.

Умови транспортування та зберігання

Умови навколишнього середовища для використання приладу:

Температура навколишнього середовища: від +5°C до +40°C. Відносна вологість: ≤ 90%. Атмосферний тиск: від 70 kPa (70 кПа) до 106 kPa (106 кПа).

Транспортування

Температура навколишнього середовища: від -20°C до +50°C; Відносна вологість: ≤ 90%; Прилад придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським та авіаційним транспортом. Під час транспортування прилад слід надійно закріпити, щоб запобігти сильній вібрації, ударам, перекиданню та падінню; необхідно забезпечити правильне положення («верхньою стороною догори»), обережне поводження та захист від дощу. Допускається складати не більше 5 масажерів один на один.

Зберігання

- Продукт слід зберігати в сухому, добре вентильованому місці, подалі від корозійних речовин.
- Кількість масажерів, складених один на один, не повинна перевищувати 5 шарів.
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, його слід очистити, упакувати та зберігати. Рекомендується раз на місяць доставати прилад і заряджати його, щоб запобігти впливу вологи.

Гарантійні умови

1.3 дати покупки на масажний міні-пістолет надається безкоштовна гарантія терміном на 1,5 року за наявності документа, що підтверджує покупку.

2. Безкоштовне гарантійне обслуговування не надається у разі несправностей, спричинених з вини користувача, зокрема:

- A. несправність, спричинена розбиранням та внесенням змін до конструкції приладу;
- B. несправність, спричинена необережним падінням під час використання або поводження з приладом;
- C. несправність, викликана відсутністю належного обслуговування;
- D. несправність, спричинена недотриманням інструкцій з використання наведених в цьому посібнику;
- E. несправності, спричинені неналежним ремонтом або ремонтом, виконаним неуповноваженим сервісним центром.

3. Послуги з ремонту, що не покриваються гарантією, оплачуються відповідно до встановлених правил.

4. Будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію сервісної служби, якщо вам необхідно скористатися гарантійним обслуговуванням.

5. Під час гарантійного обслуговування, за потреби, ми можемо надати кваліфікованому технічному персоналу, визначеному нами, електричну схему приладу та інформацію щодо компонентів, які підлягають ремонту.

6. Післяпродажне обслуговування надається протягом 5 років з дати покупки.

7. Інформацію про дату виготовлення дивіться на приладі або пакувальній коробці